



Subcutaaninen kipupumppuhoito


- Subcutaanikanyylit ovat leikkaus- ja anestesiayksikön heräämössä.
- Subcutaaninen kanyyli asetetaan rintakehän alueelle, vatsalle, käsivarteen, selkään tai reiteen.
- Iho pyyhitään puhdistusaineella ennen subcutaanikanyylin asettamista.



Subcutaanikanyylin (Neria™ guard) asettaminen:




1 Vedä suojapaperi varovasti irti liimapinnasta.

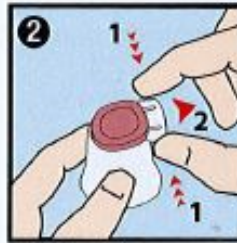


2 Irrota kiinnityslaitteen suojus puristamalla sitä varovasti sivuista ja vetämällä se suoraan ulos.




3 Aseta laite iholle ja paina punainen aktivointipainike kokonaan alas infuusionetin asettamiseksi.

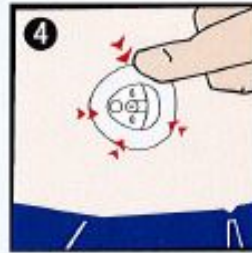

4 Painele teippi ihoon.

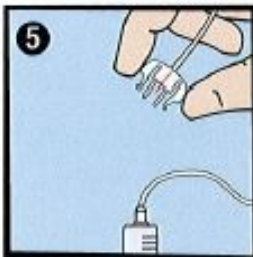

5 Liitä pumppu ja täytä letku valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

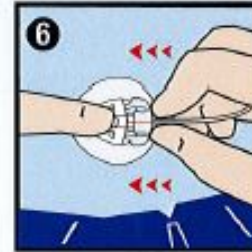

6 Aseta sormi kanyylikotelon päälle, työntäen samalla liitännäistä suoraan koteloon, kunnes kuulet pienen "klik-äänen".

- Muista täyttää letkusto ennen sen liittämistä subcutaanikanyyliin (kts.kuva 5).
- Laita lopuksi Tegaderm-kalvo kanyylin liikkumisen estämiseksi.
- Aloitetaan lääkehoito kipupumpulla. Ennen hoidon aloitusta tarkista pumpun säädöt toisen hoitajan kanssa (kaksoistarkastus).
- Huomioi aseptiikka ja asianmukainen käsihygienia
- S.c. -kanyyli vaihdetaan 5 - 7 vrk:n välein. Samalla vaihdetaan kipupumpun väliletkusto.
- S.c. -kanyylin kanssa voi käydä suihkussa. Tällöin kipupumpun letkusto irrotetaan s.c.-kanyylin letkustosta ja sen suojaksi laitetaan Tegaderm-kalvo.



- Tarkkaile s.c. -kanyylin juurta päivittäin. Ihon ärtyessä - voimakas punoitus, urtikaria, iso patti - vaihdetaan kanyylin paikkaa.