




## ENGNELL RINTAPUMPUN KOKOAMINEN

(Kuvat: Mamselli äidinmaitokeskus)



Rintapumpun mukana tulevat lypssetti,  
lypssetin letku+ välipullo sekä virtajohto

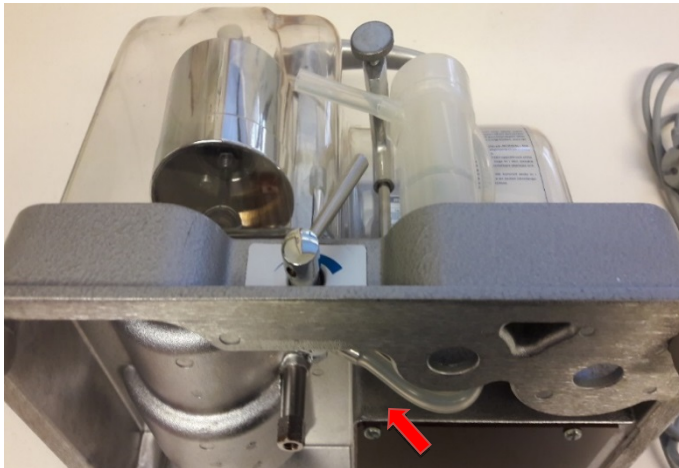

1. Yhdistä lypssetin letku lypssetistä  
löytyvään välipulloon. Käännä konetta  
kyljelleen, pujota letku koneessa  
olevan reiän kautta koneen alapuolelle  
ja yhdistä imupullo letkun kautta  
koneeseen.



2. Koko lypssetti joka sisältää  
maitopullon, rintakappaleen ja  
liitäntäjohdon



3. Yhdistä maitopullo liitântäletkulla  
välipulloon



4. Liitä virtajohto paikoilleen jolloin kone  
on käyttövalmis. Imuvoimaa voit säätää  
koneen keskellä olevasta vivusta.

#### RINTAPUMPUN OSIEN PUHDISTAMINEN

Käytetyt astiat ja välineet pestään astianpesuaineella ja huuhdellaan juoksevalla vedellä. Välineet keitetään 5 minuutin ajan jokaisen käytön jälkeen. Kattilan tulee olla niin suuri, että kaikki osat peittyvät veteen.

Tämän jälkeen puhtaat osat nostetaan kuivumaan puhtaan alustan päälle. Kuivat osat on suojattava pölyltä, joten niitä voi säilyttää myös kattilassa kannen alla. Kaada silloin kiehuva vesi pois ja pidä kansi auki, kunnes osat ovat kuivuneet. Sulje kansi ja osat säilyvät näin puhtaampina seuraavaan käyttökertaan saakka.

Kokoa rintapumppu puhtain käsin.